

Уход за изделием:

- стирать при температуре не более 30°C;
- ручная стирка;
- сушить на горизонтальной поверхности;
- не использовать отбеливатель;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- не гладить утюгом;
- не выкручивать;
- **запрещена эксплуатация влажного изделия.**

Гарантийные обязательства:

- гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи;
- срок службы не менее 1 года.

Комплект поставки:

Манжета фиксирующая* (с фиксацией на плече).....		шт.
Манжета фиксирующая* (с фиксацией на бедре).....	1	шт.
Руководство по эксплуатации.....	1	экз.
Потребительская тара.....	1	шт.

* Манжета поставляется в разобранном виде

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:


ООО «ВИТАФОН» 198097, Россия,
г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, 23 лит.А

Телефоны для справок:
8 800 100-19-45 (звонок по России бесплатный)



Отсканируйте QR-код для перехода на страницу товара на сайте
www.vitafon-market.ru

Адрес электронной почты: info@vitafon.ru

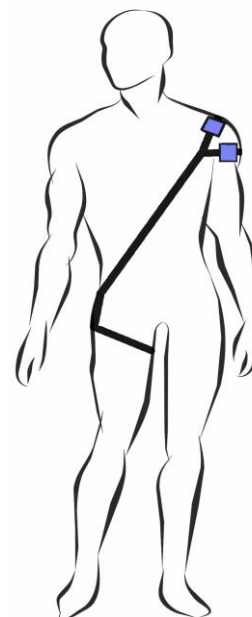

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ "ПЛЕЧЕВАЯ" (с фиксацией на бедре) ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «ВИТАФОН»

www.vitafon-market.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Манжета фиксирующая "Плечевая" изготовлена в соответствии с действующей технической документацией (ТО 8157-002-33159359) и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ "ПЛЕЧЕВАЯ"

ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манжета предназначена для индивидуального использования, применяется для фиксации виброфонов аппаратов серии «Витафон» в области плечевого сустава. Манжета надевается непосредственно на тело под одежду или поверх одежды из тонких тканей.

Варианты комплектаций

Манжета выпускается в двух вариантах:

1. С фиксацией на плече (Рис.2)
2. С фиксацией на бедре (Рис.3)

Комплект поставки

Вариант 1 — фиксация на плече

- Наплечная часть с карманами для виброфонов (поз.1 на рис.1 и 2);
- Грудной ремень (поз.2 на рис.2 и 3);
- Малый фиксирующий ремень (поз.3 на рис.2) для предотвращения сползания манжеты с плеча

Вариант 2 — фиксация на бедре

- Наплечная часть с карманами для виброфонов
- Грудной ремень
- Набедренный ремень (поз.5 на рис.3 и 4) для предотвращения смещения грудного ремня в область подмышечной впадины.



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установите 2 или 4 виброфона в карманы манжеты (рис.1). Виброфоны должны располагаться мембранами к голубой ткани;
2. Пристегните длинный ремень (поз.2 на рис.2 и 3) к наплечной части манжеты с карманами (поз.1 на рис 2 и 3) и наденьте манжету на плечо голубой тканью к телу;
3. Отрегулируйте длину ремня при помощи липучки так, чтобы манжета удобно прилегала к телу и не смещалась при движении.
4. В зависимости от комплектации Вашей манжеты зафиксируйте положение виброфонов на плече, как показано на рис. 2 или 3.

Вариант 1. Фиксация на плече (рис.2)

Наденьте малый ремень (поз.3) на руку ближе к локтевому суставу, отрегулируйте плотность посадки. Один конец ремешка-регулятора (поз.4) пропустите в шлевку между карманами с виброфонами. Отрегулируйте длину так, чтобы манжета не смещалась при движении руки, и зафиксируйте липучкой.

Вариант 2. Фиксация на бедре (рис.3 и 4)

Застегните ремень (поз.5) на бедре и отрегулируйте плотность посадки. Соедините набедренный (поз.5) и грудной (поз.1). ремни при помощи карабина (поз.6). Отрегулируйте длину грудного ремня для комфортного положения манжеты. (рис 3).

⚠ Важно: Виброфоны должны быть плотно прижаты к телу во время процедуры!